


Kabelloses Kompressionssystem zur Beinregeneration

Professionelles Tiefenentspannungsgerät für Füße und Beine

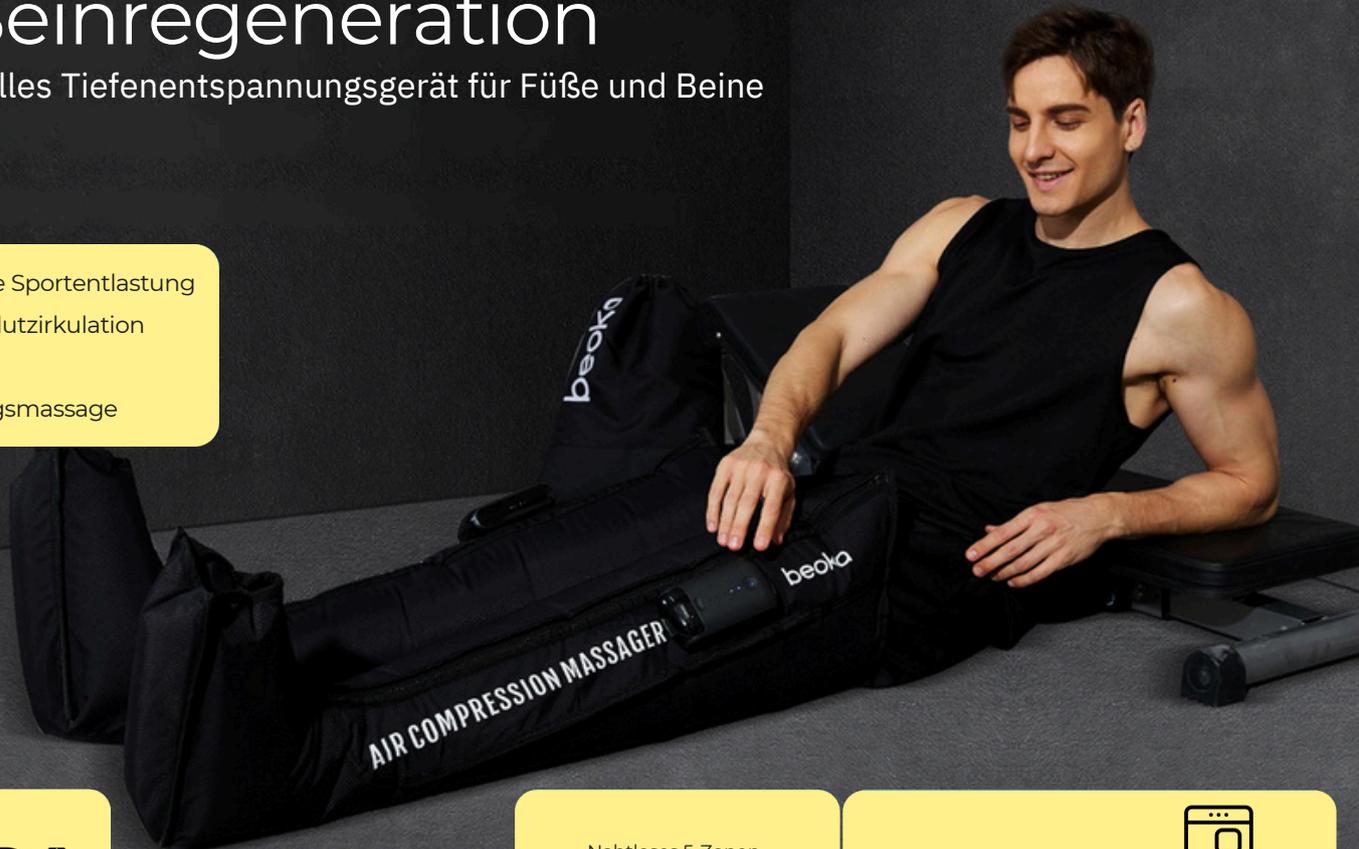

- Professionelle Sportentlastung
- Fördert die Blutzirkulation
- Tägliche Entspannungsmassage

FDA-zugelassen



Kabelloses Design



Herausnehmbarer Akku mit Ladefunktion



Nahtloses 5-Zonen-Luftdruckdesign



App-Steuerung




5-stufige Druckeinstellung



Reißverschluss design



3 Massagemodi

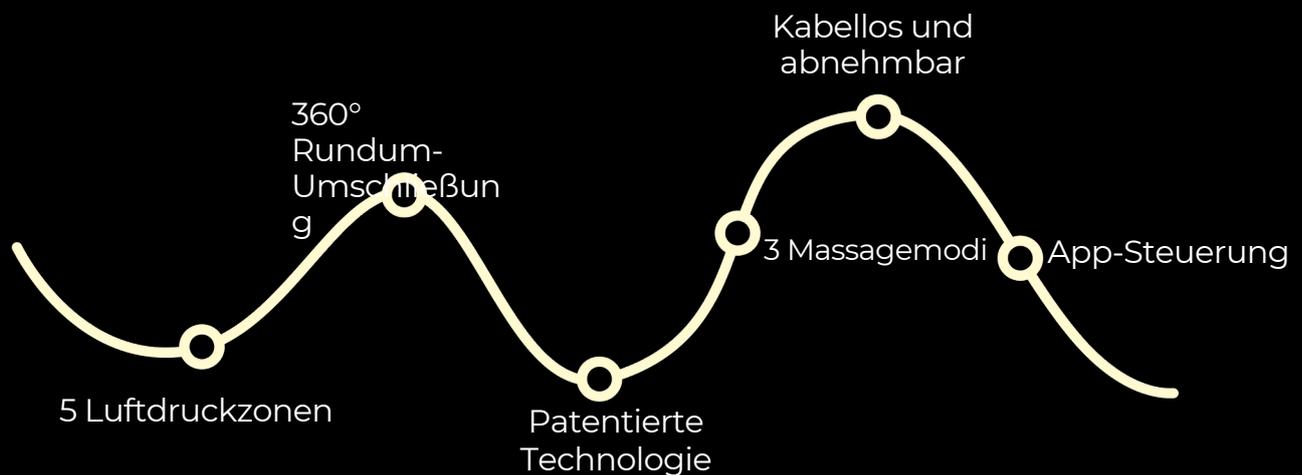


Personalisierte Massage




Erzielen Sie optimale Beinentspannung basierend auf professionellen physiotherapeutischen Prinzipien.

Produktmaße

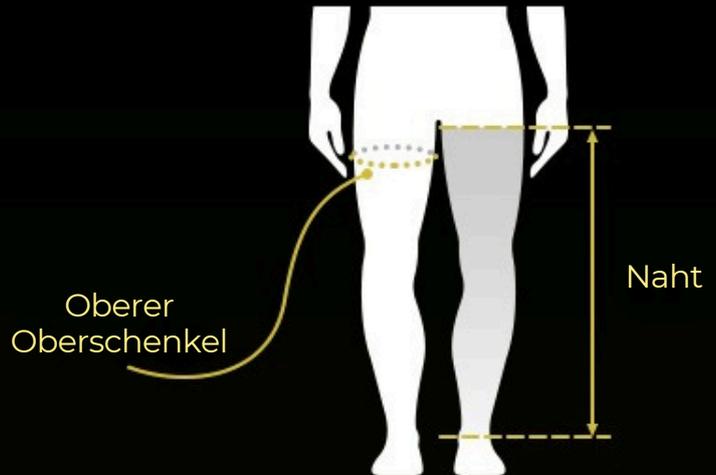

Kompressions-Airbags mit 5 Zonen


Überlappende Airbag-Struktur, umlaufende Luftdruckmassage, tiefgehende 360°-Massage ohne tote Winkel, fördert die Blutzirkulation und eine schnellere Regeneration.

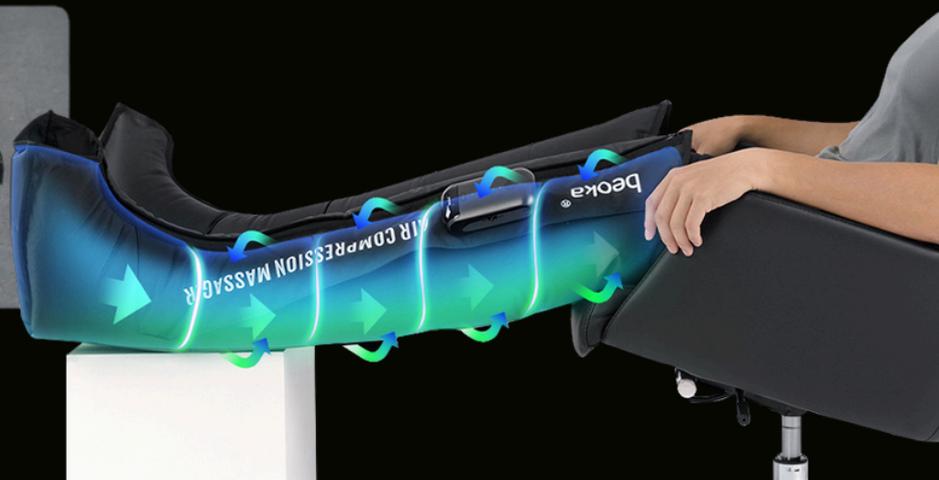

Vollständig überlappende Luftkammern 360°-Massage

Beoka-Kompressionsstiefel:

Andere:

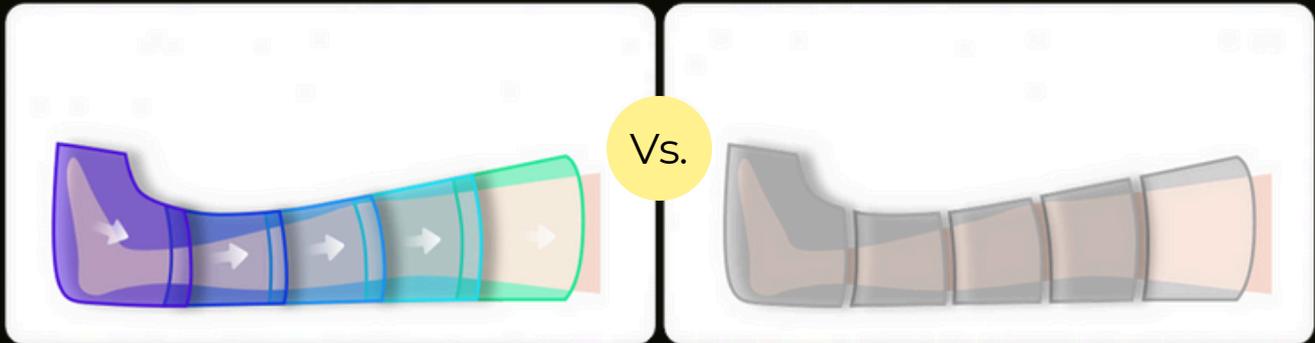

3 Massagemodi



Modus 1: Müdigkeit lindern




Geeignet für Personen, die lange stehen oder gehen und Muskelkater in den Beinen haben.

Modus 2: Sportregeneration



Geeignet, um Muskelkater nach dem Training tiefgehend zu lindern.

Modus 3: Tiefenpflege

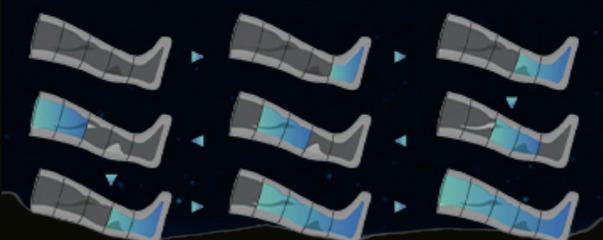

Geeignet für die tägliche Tiefenpflege von Personen, die lange im Büro sitzen und wenig Bewegung haben, was zu Weichteilsteifheit führt.

Kabellose Nutzung und herausnehmbarer Akku zum Laden




Sie können die Kompressionsmassage-Stiefel jederzeit und überall zusammen mit Familie oder Freunden verwenden, um die Beinmuskeln zu entspannen und Müdigkeit zu lindern; das Design mit herausnehmbarer Batterie befreit Sie von Kabeln, und das schweißsfeste Innenfutter lässt sich leichter reinigen, was die Entspannungsmassage vereinfacht.



App-Verbindung personalisierte Massage

Verbinden Sie sich mit der App, um eine synchronisierte Massage zu genießen.

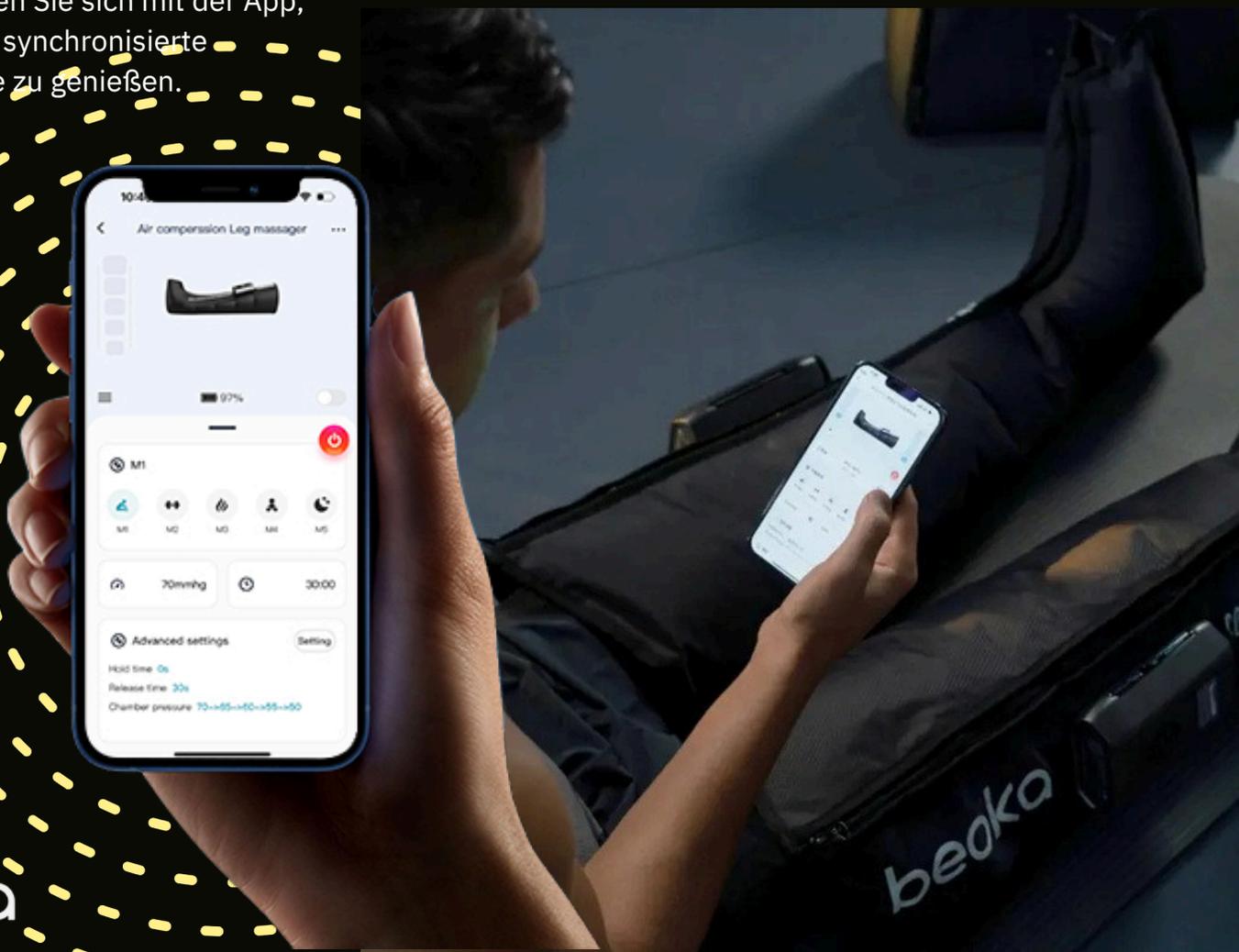

Wer braucht es?

Eigenschaften

-  Büroangestellte
-  Sportbegeisterte
-  Athleten
-  Fitnessliebhaber



-  Wissenschaftliche Erholungsmethode
-  Fördert die Blutzirkulation
-  Professionelle Sportentlastung
-  Tägliche Entspannung

Tragetasche



Feine doppelte Nähte, auslaufsicher

YDD-Verbindungsdesign führender Marken

Wasser- und schweißresistenter Stoff, leicht zu reinigen

Platzsparendes Hakendesign

Gebrauchsanleitung

01

Stecken Sie Ihre Beine in die Kompressionsstiefel und schließen Sie den Reißverschluss.

02

Stellen Sie zum Einschalten den Schalter auf ON.

03

Drücken Sie kurz die Modus-Taste, um den Müdigkeitslinderungsmodus zu starten und Stufe 1 zu aktivieren.

04

Drücken Sie während des Betriebs kurz die Geschwindigkeit-Taste, um zwischen den Stufen 1-5 zu wechseln.

05

Drücken Sie die Modus-Taste zweimal schnell innerhalb von 1 s, um den Modus zu ändern (blau: Müdigkeit lindern / grün: Sportregeneration / gelb: Tiefenpflege).

06

Halten Sie die Standby-Taste 1,5 s gedrückt; die Geschwindigkeit wird auf 0 gesetzt und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

07

Schalten Sie anschließend den Schalter auf OFF, trennen Sie die Stromversorgung und lassen Sie den Druck ab.