

## CAMILLA 3 CUERPOS POR CILINDROS DE GAS, ELEVABLE CON RUEDAS, GAMA ECONOMICA Y GINECOLOGICA "ECOMAX-3X"



Ref. MM-ECOMAX-3H - Cod 4037



Ref. MM-ECOMAX-3E  
Cod 4038

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER. Lecho 3 cuerpos con respaldo y pie abatibles por cilindro de gas en palanca lado derecho respaldo, lado izquierdo el pie. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo. Sistema "4x4" de rigidez mejorada con 2 compases motrices. Rodamientos Nylon sin "chirridos". Con ruedas escamoteables para mover camilla con paciente accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignifugo M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Orificio facial y tapa. Pata con nivelador. Paso de Grúas 14 cm.



### COMBINACIONES: 4 MODELOS

Cod. / Ref.	ANCHO 62 CM.	ANCHO 70 CM.	HIDRAULICA	ELECTRICA
4037-62 / ECOMAX-3H62	*		*	
4037-70 / ECOMAX-3H70		*	*	
4038-62 / ECOMAX-3E62	*			*
4038-70 / ECOMAX-3E70		*		*



ECOMAX-GINECOLOGICA:  
OPCION PERNERAS:+REF.MM-JP

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

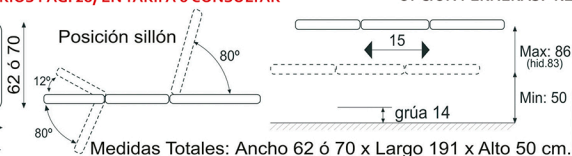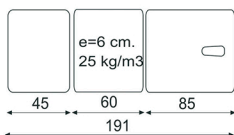

Max: 86  
(hid.83)

Min: 50

