


## COLCHONETA DE CARRO DE LAVADO MF-CLT:

Colchoneta flexible de 220x100 cm. ignífuga M2, hermética, **TERMOSOLDADA** de PVC a 2 caras, con acolchado de espuma interior, resistente a agentes químicos y orgánicos, calor y vapor. Desagüe libre de diam. 40 mm. con manguera de 150 cm.

Nuestro Lecho, de Fenolico de 6 mm.

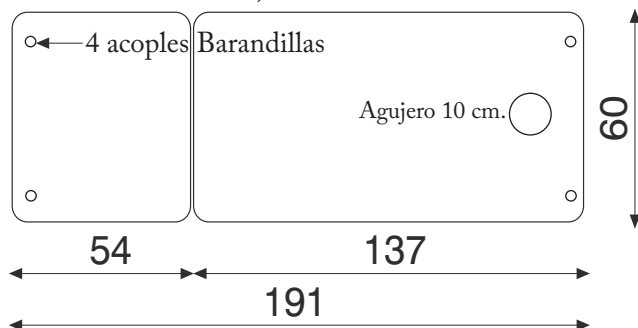

Diámetro real cuello desagüe 88 mm.  
Orificio óptimo en lecho de 100 mm,  
o válido desde 90 mm. hasta 105 mm.  
En nuestro carro el desagüe coge la  
colchoneta y el lecho todo unido.



**NOTA:** La colchoneta es flexible, y suele adaptarse a otros modelos de carros aun con variaciones de centímetros. La manera idónea de anclaje es que el desagüe suministrado una la colchoneta y lecho con el tuercón, y después atar los 2 cinturones al lecho vigilando no pasarlos por alguna parte mecánica. Adicionalmente se suministran 3 trozos de velcro adhesivo extrafuerte de 100\*200 mm. para pegarlos donde sea mas conveniente, pegando el velcro “macho-pinchos” en el lecho, y el velcro “hembra-suave” en la colchoneta.